

TV

GEBRUIKSAANWIJZING



Inleiding	2
Overzicht	4
Basisfuncties	6
Aansluiten op audiobronnen	10
Koppelen	11
Audio-streaming starten/stoppen	13
Stroomadapter in elkaar zetten	14
Problemen oplossen	15
Veiligheidsinstructies	17
Wettelijke aanwijzingen	18

Starkey Hearing Technologies TV werd ontwikkeld om het geluid van elektronische geluidsbronnen direct naar uw 2,4GHz draadloze hoortoestellen te streamen. Het TV accessoire kan worden aangesloten op diverse elektronische audiobronnen, waaronder televisies, computers, MP3-spelers, DVD-spelers en settopboxen.


Het TV accessoire kan audio naar een ongelimiteerd aantal gebruikers tegelijk streamen, zodat zij dezelfde luisterervaring kunnen delen.

Streaming – Audio of geluid wordt draadloos vanaf het TV accessoire naar uw hoortoestellen overgedragen


Inhoud van de verpakking



- Starkey Hearing Technologies TV
- Stroomadapter
- Optische Toslinkkabel
- 3,5 mm naar RCA kabel
- Gebruiksaanwijzing

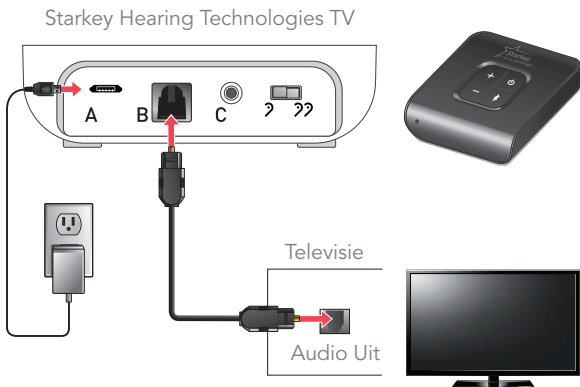Standaard installatie

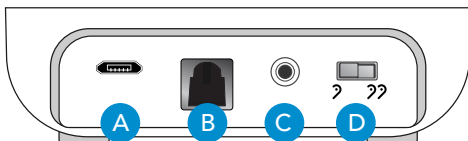


Overzicht





- A. **Aansluiting stroomvoorziening:** Er is een stroomadapter meegeleverd.
- B. **Aansluiting optische TOSLINK:** er is een Toslinkkabel meegeleverd.
- C. **Analoge aansluiting:** er is een 3,5 mm-naar-RCA kabel meegeleverd.
- D. **Mono/stereo schakelaar**
 -  (MONO) – selecteer mono als u één hoortoestel draagt
 -  (STEREO) – selecteer stereo als u twee hoortoestellen draagt



 : Schakelt Starkey Hearing Technologies TV in en uit

 : Koppelen met hoortoestellen

 en  : druk op de "+" om het volume van de audio stream te verhogen. Druk op de "-" om het volume te verlagen.

Tip: Het volume van de stream kan ook worden aangepast via de Thrive™ app, Starkey Hearing Technologies Remote, en/of het bedieningselement van het hoortoestel. Bekijk de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestel of neem contact op met uw audicien voor meer informatie over de instellingen van uw systeem.


LED-lampje: biedt handige informatie over het TV accessoire.

LED	HUIDIGE STATUS
Uit	Apparaat is uitgeschakeld
Constant groen	Apparaat is ingeschakeld, maar streamt geen audio
Constant blauw	Apparaat is ingeschakeld en streamt audio
Knippert blauw	Stand voor het koppelen met hoortoestellen is geactiveerd. <i>Bekijk voor meer informatie het hoofdstuk over Koppelen op pagina 11.</i>
Constant rood	Mogelijk is er een fout opgetreden


Basisfuncties

Om Starkey Hearing Technologies TV snel in gebruik te nemen binnen een standaard installatie:


1. Haal de plastic dopjes van beide uiteinden van de Toslinkkabel.
2. Sluit de Toslinkkabel aan op de Audio UIT aansluiting van uw elektronische audiobron. Zet de elektronische audiobron aan.
 - **Let op:** *Als uw apparaat geen Audio UIT met TOSLINK aansluiting heeft, probeer dan een andere elektronische audiobron of probeer de 3,5 mm naar RCA kabel.*
3. Sluit het andere einde van de Toslinkkabel aan op de achterkant van uw TV accessoire (aansluiting B).
4. Steek de netstekker van de stroomadapter in het stopcontact.
 - **Let op:** *Als de stroomadapter niet over de juiste stekker beschikt, bekijk dan het hoofdstuk **Stroomadapter in elkaar zetten** op pagina 14.*
5. Sluit de micro-USB stekker van de stroomadapter aan op de achterkant van het TV accessoire (aansluiting A).
6. Druk op de aan/uit knop van het TV accessoire om het apparaat in te schakelen.

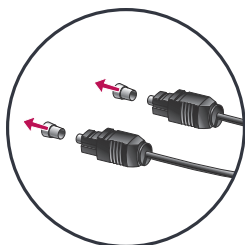


1

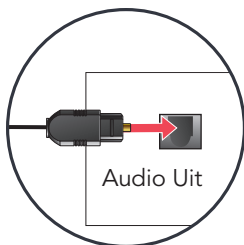


2

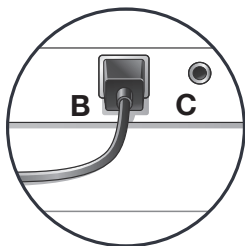


3

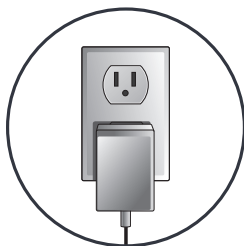

4

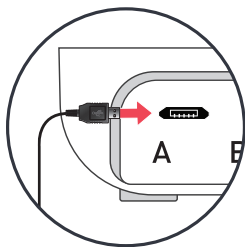


5

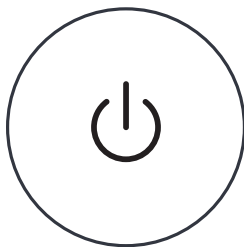


6


7. Wanneer het LED-lampje op de voorkant constant blauw gloeit, heeft het TV accessoire audio gedetecteerd en streamt het deze audio.

Tip: Controleer uw installatie of bekijk het hoofdstuk Problemen Oplossen als het LED-lampje constant groen blijft gloeien.

8. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen ingeschakeld zijn.
 - **Let op:** voordat u de eerste keer audio kunt streamen, moeten uw hoortoestellen met het TV accessoire worden gekoppeld. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk over **Koppelen** op pagina 11.
9. Om audio te streamen:
 - Open de Thrive app en selecteer de optie 'Start Streaming' om te beginnen met het streamen van audio via het TV accessoire.
 - Raadpleeg voor meer mogelijkheden het hoofdstuk **Audio-streaming starten/stoppen** op pagina 13.
10. Druk op de +/- knop van het TV accessoire om het volume van de stream te wijzigen.
11. Om te stoppen met streamen volgt u deze aanwijzingen:
 - Open de Thrive app en selecteer 'Stop Stream' om op te houden met het streamen van audio via het TV accessoire.
 - Schakel het TV accessoire uit ().
 - Raadpleeg voor meer mogelijkheden het hoofdstuk **Audio-streaming starten/stoppen** op pagina 13.

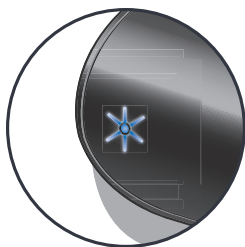

7

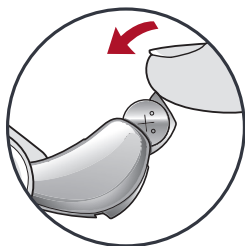


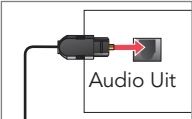
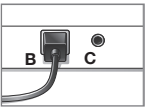
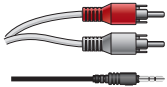
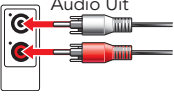
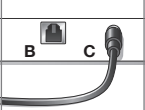
8



10

Aansluiten audiobronnen

Er bestaan verschillende manieren voor het aansluiten van een audiobron op het Starkey Hearing Technologies TV accessoire. Bekijk uw elektronische audiobron aandachtig om vast te stellen over welke AUDIO UIT mogelijkheden deze beschikt.

	Steek de kabel in de AUDIO UIT aansluiting van uw elektronische audiobron	Sluit het andere einde van de kabel aan op de achterkant van het TV accessoire
Optische TOSLINK 		Gebruik aansluiting B 
Analoge RCA naar 3,5 mm 	Audio Uit  <p>Let op: Sluit rood op rood aan en wit op wit.</p>	Gebruik aansluiting C 

Tip: wanneer het LED lampje tijdens de eerste installatie constant blauw gloeit, wijst dit erop dat de audiokabel correct op het TV accessoire is aangesloten en dat audio-streaming actief is.

Koppelen

Om interactie tussen Starkey Hearing Technologies TV en uw hoortoestel(len) mogelijk te maken, moet u het TV accessoire eerst met elk hoortoestel koppelen. Deze stap hoeft u slechts één keer uit te voeren, aangezien de apparaten elkaar hierna automatisch herkennen wanneer ze zijn ingeschakeld en zich binnen het draadloze bereik van elkaar bevinden.*

Om het TV accessoire en uw hoortoestel(len) te koppelen:

1. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen niet met andere Bluetooth-apparaten zijn verbonden. Dit doet u door:
 - Bluetooth op uw mobiele telefoon uit te schakelen.
 - Schakel andere accessoires in de buurt uit, bijvoorbeeld Starkey Hearing Technologies TV of Remote Microphone +, indien u deze accessoires eerder met uw hoortoestellen heeft gekoppeld.
2. Schakel uw hoortoestellen uit en schakel ze vervolgens opnieuw in.
3. Plaats uw hoortoestellen binnen 15 cm van het TV accessoire.

**Standaard operationeel bereik is maximaal 15 meter. Deze reikwijdte is kleiner in geval van externe factoren zoals versperringen, storende signalen of de positionering van het menselijk lichaam. Het apparaat kan op een grotere afstand worden gebruikt, maar dit kan leiden tot een lagere geluidskwaliteit en zwakkere verbinding.*

4. Druk op de knop  van het TV accessoire. Het LED-lampje op de voorkant zal blauw knipperen. Tijdens het uitvoeren van deze stap wordt het streamen van audio tijdelijk gestopt.
5. Voor **meerdere** hoortoestellen:

Eerste LED knippert	Tweede LED knippert	Resultaat koppeling	Volgende stap
1	2	Beide hoortoestellen gekoppeld	Klaar
1	2	Slechts één hoortoestel gekoppeld	Herhaal stap 1 – 5
1	n.v.t.	Geen hoortoestellen gekoppeld	Herhaal stap 1 – 5

6. Voor een **enkel** hoortoestel:

LED knippert	Resultaat koppeling	Volgende stap
1	Gelukt	Klaar
1	Niet gelukt	Herhaal stap 1 – 4 en 6

Audio-streaming starten/stoppen

Het streamen van audio via Starkey Hearing Technologies TV kan op verschillende manieren worden begonnen of gestopt.

- **Thrive app** – Open de app op uw mobiele telefoon of tablet. Selecteer de optie 'Start/Stop Streaming' om te beginnen of stoppen met het streamen van audio.
- **Starkey Hearing Technologies Remote** – Indien uw audicien dit voor u heeft ingesteld, kunt u op de knop 'Favoriet' (☆) drukken.
- **Bedieningselement hoortoestel** – Indien uw audicien dit voor u heeft ingesteld, kunt u met een bepaalde handeling (bijv. het lang indrukken van een knop) het streamen starten/stoppen.

Het streamen van audio stopt ook wanneer:


- Er geen binnenkomend audiosignaal wordt gedetecteerd.
- Het TV accessoire is uitgeschakeld.

U hoort een signaaltoon welke aangeeft dat het streamen van audio begint of stopt.


Stroomadapter in elkaar zetten

Starkey Hearing Technologies TV kan worden geleverd met een aantal verschillende netstekkers die in diverse landen worden gebruikt. Wanneer de stroomadapter in elkaar moet worden gezet:


1. Kies de netstekker die in uw land wordt gebruikt.
2. Schuif de stekker op de stroomadapter tot deze vast klikt.
3. Om de stekker te verwijderen, drukt u op het lipje en schuift u de stekker van de kabel weg.

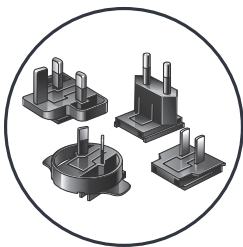

1

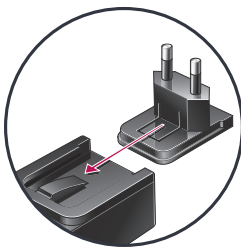

2

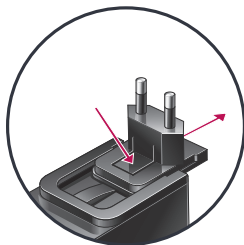

3

Problemen oplossen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
Een of beide hoortoestellen houdt onverwachts op met het streamen van audio.	Het hoortoestel bevindt zich mogelijk buiten het draadloze bereik.	Ga dichterbij het TV accessoire zitten.
	Batterij van het hoortoestel is bijna leeg en levert onvoldoende stroom om audio te kunnen streamen.	Vervang de batterij van het hoortoestel door een nieuwe.
	De positie van het TV accessoire is mogelijk niet optimaal voor streaming.	Pas de ruimtelijke positie van het TV accessoire aan door het apparaat iets naar links of naar rechts te draaien.
	Grote objecten, zoals meubelstukken of een muur, kunnen het signaal blokkeren.	Voor een optimaal resultaat, dient de ruimte tussen uw hoortoestellen en het TV accessoire vrij te zijn.
LED gloeit constant blauw, maar er is via de hoortoestellen geen geluid hoorbaar.	Hoortoestellen bevinden zich buiten het draadloos bereik.	Ga dichterbij het TV accessoire zitten.
	Audio stream moet handmatig worden gestart om via de hoortoestellen te worden afgespeeld.	Start de audio stream handmatig via de Thrive app, afstandsbediening of het bedieningselement van uw hoortoestel.
	Hoortoestellen en TV accessoire zijn niet gekoppeld.	Raadpleeg het hoofdstuk Koppelen om uw hoortoestellen met het TV accessoire te verbinden.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
Ik verwacht audio te horen, maar het LED-lampje gloeit constant groen.	Mogelijk is de audiokabel op de 'audio IN' aansluiting van de elektronische geluidsbron aangesloten.	Controleer of de kabel correct in de 'audio UIT' aansluiting van de elektronische geluidsbron is gestoken.
	Er is geen binnenkomend audiosignaal beschikbaar.	Schakel de elektronische audiobron in.
	De output van de elektronische audiobron heeft een fout formaat.	Stel de digitale output van de elektronische audiobron in op PCM of Dolby Audio.
LED gloeit constant rood.	Mogelijk is er een fout opgetreden.	Haal de stroomadapter van aansluiting A los, wacht 5 seconden en sluit de adapter opnieuw aan.
De gestreamde audio loopt niet synchroon met het beeld op de televisie.	Veel nieuwe televisies (zoals HDTV's) doen er lang over om het videosignaal te verwerken en vertragen het audiosignaal om synchroon te blijven.	<ul style="list-style-type: none"> • Probeer een van de andere audio outputs van uw televisie. Hiervoor heeft u mogelijk een ander type kabel nodig. • Probeer een andere elektronische audiobron te gebruiken. Als u bijvoorbeeld een settopbox gebruikt, probeer dan de audio UIT van de televisie of vice versa. • Sommige elektronische audiobronnen (zoals televisies of A/V receivers) hebben een ingebouwde optie voor het aanpassen van de timing tussen audio en video.

Veiligheidsinformatie

Beoogd gebruik

De Starkey Hearing Technologies TV is volledig conform Internationale Electromagnetische standaarden ontwikkeld. Ondanks alles bestaat de mogelijkheid van interferentie met hoogspanningsleidingen, metaaldetectoren, electromagnetische velden en andere hulpmiddelen en radiosignalen.

Draagt u een pacemaker of een ander medisch geïmplantiseerd apparaat, wendt u zich dan tot uw arts om mogelijke risico's vooraf uit te sluiten. Indien u een MRI- of MRT-Behandeling moet ondergaan, raden wij u dringend af het TV accessoire te gebruiken.

Internationaal gebruik

Uw Starkey Hearing Technologies TV en draadloze overdracht zijn specifiek voor een land waar ook een licentie voor is. Het werkt op een radiofrequentie die mogelijk in het buitenland voor dit gebruik niet vrijgegeven is. Dit kan - bij internationale reizen - mogelijk problemen geven, zoals storingen met andere elektronische apparaten of storingen in het TV accessoire zelf.

FCC ID: EOA-24TV

IC: 6903A-24TV (Models 800 and 801)

FCC Aanwijzing

Het toestel komt overeen met Deel 15 van de FCC-Regulering en met RSS-210 overeen. Deze houden de volgende condities in: (1) Het toestel veroorzaakt geen zware interferenties en (2) het toestel moet interferenties afzwakken of beëindigen, ook wanneer dat leidt tot tijdelijke onbruikbaarheid.

Belangrijk: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor optredende onderbrekingen door radio of TV signalen die door ongeautoriseerde modificatie van het apparaat optreden.

Starkey Hearing Technologies TV is ontwikkeld onder toezicht van de geldende richtlijnen en correspondeert met de Directive 1999/5/EC. Op onderstaand adres is een kopie van Declaration of Conformity beschikbaar.

Aanwijzing: Deze apparatuur is ontworpen en getest in overeenstemming met de limieten voor een Klasse B-apparaat, met betrekking tot deel 15 van de FCC regelgeving. Deze beperkingen zijn bedoeld om te beschermen tegen ernstige storingen in een huiselijke installatie.

Deze apparatuur is ontworpen om radiofrequenties te genereren, te gebruiken en uit te stralen. Foutieve installatie en gebruik kan interferentie met andere Radio overdragingen veroorzaken. Storingen kunnen niet worden uitgesloten. Als een ernstige storing van de radio of tv en ze niet worden opgelost door het in- / uitschakelen van de zender, probeer dan het volgende:

- Stel de antenne opnieuw in.
- Vergroot de afstand tussen de zender en ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een andere audiobron. Controleer de juiste werking door een andere configuratie.
- Neem contact op met een audicien, erkende dealer of ervaren radio / tv-technicus.

Fabrikant

Starkey Laboratories
World Headquarters
6700 Washington Ave. So.
Eden Prairie,
Minnesota MN 55344
USA

www.starkey.nl
www.starkey.be

Starkey Nederland en België

KIND HOREN
Laan van de Leeuw 50
7325 BD APELDOORN

Telefoon +31 (0)55 360 21 11
info@kindhoren.nl

